




Řešení pro izolaci pacientů

David Kosina
Monika Sveřepová
Veronika Loosová

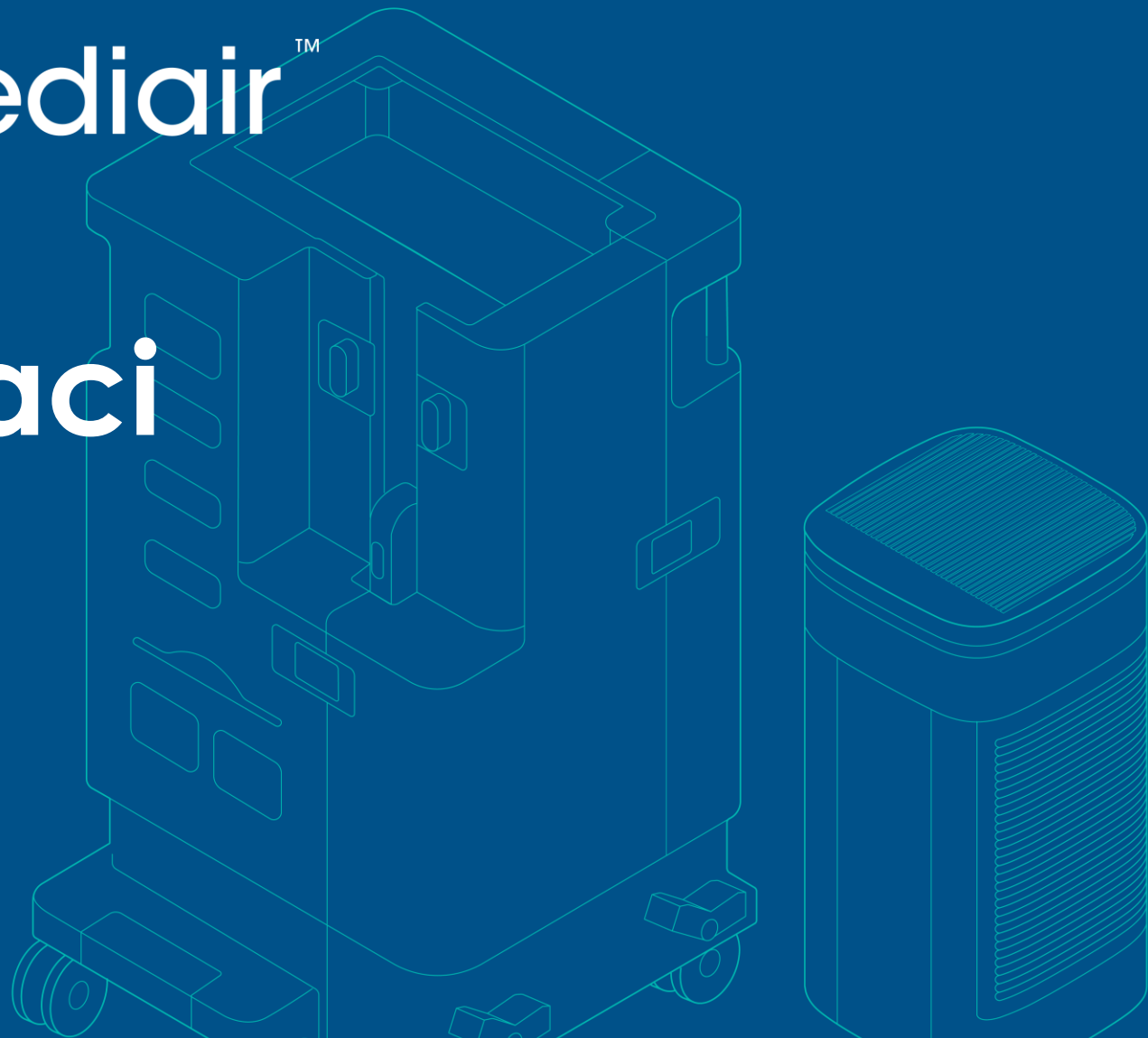

Představení

Rediroom a Rediair jsou inovativními produkty od společnosti

gama
healthcare

výrobce desinfekčních ubrousků

clinell[®]



ADYTON[®]
medical devices

Co je Rediroom?

ADYTON®
medical devices

01.

A photograph of a hospital room. In the foreground, a patient is lying in a hospital bed. To the right, a nurse is standing near a mobile medical unit, which is a tall, white, wheeled cart with various medical equipment. The room has large windows with blue curtains and a light-colored floor. The overall scene is clean and professional.

Co je Rediroom?

Mobilní izolační řešení.

Navrženo, aby pomáhalo při:

- Prevenci vzájemné kontaminace
- Podpoře prevenci a kontroly infekcí
- Všude tam, kde je potřeba rychlá a účinná izolace pacienta



Co je Rediroom?

Ve složené podobě:

- Jedná se o pojízdný vozík na osobní ochranné prostředky
- Vhodný jak pro skladování výrobků OOP
- Stejně tak desinfekční ubrousky



Co je Rediroom?

V rozbalené podobě:

- Se stává okamžitou izolační místností
- Vytváří fyzickou bariéru mezi infekčním pacientem a kýmkoli jiným ve stejné místnosti
- Filtr HEPA 14 s uhlíkovými filtry zachycují pevné částice, pachy a 99,995% patogenů přenášených vzduchem




PLNĚ FUNKČNÍ ZA MÉNĚ NEŽ 5 MINUT

Vhodné jako:

- ✓ Opatření proti kontaktu
- ✓ Opatření proti šíření kapének




PLNĚ FUNKČNÍ ZA MÉNĚ NEŽ 5 MINUT



Negativní proudění vzduchu v Rediroom

- Vzduch je nasáván pod závěsovými dveřmi a přes střechu
- Proudí jednotkou okolo infekčního pacienta do ventilační jednotky s filtrem (v zadní části Rediroomu)
- Výměna vzduchu 12x za hodinu
- Filtr HEPA 14 (účinnost 99,995%)
- Není to plnohodnotné podtlakové řešení

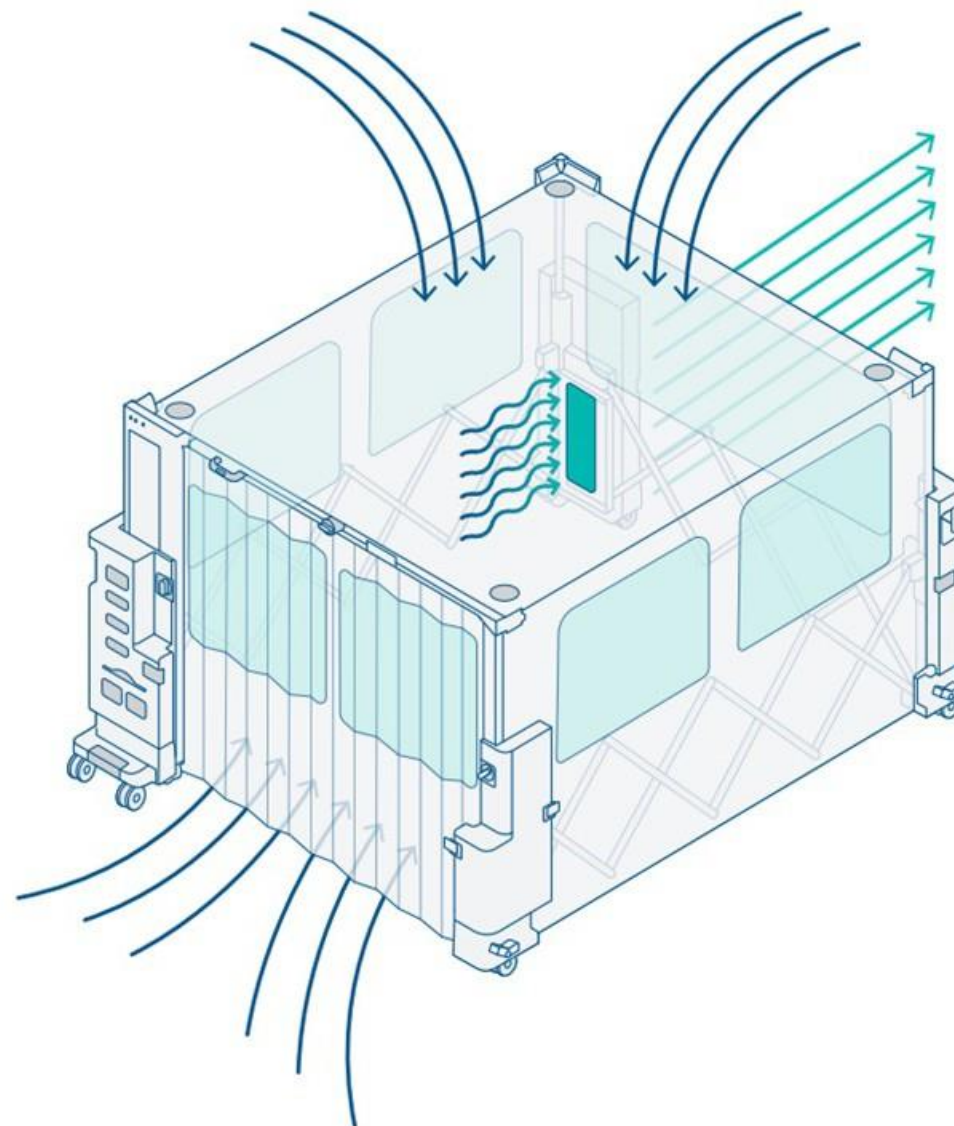

KEY



External air entering Rediroom




Air moving through the HEPA filter



Filtered air leaving Rediroom

Shrnutí

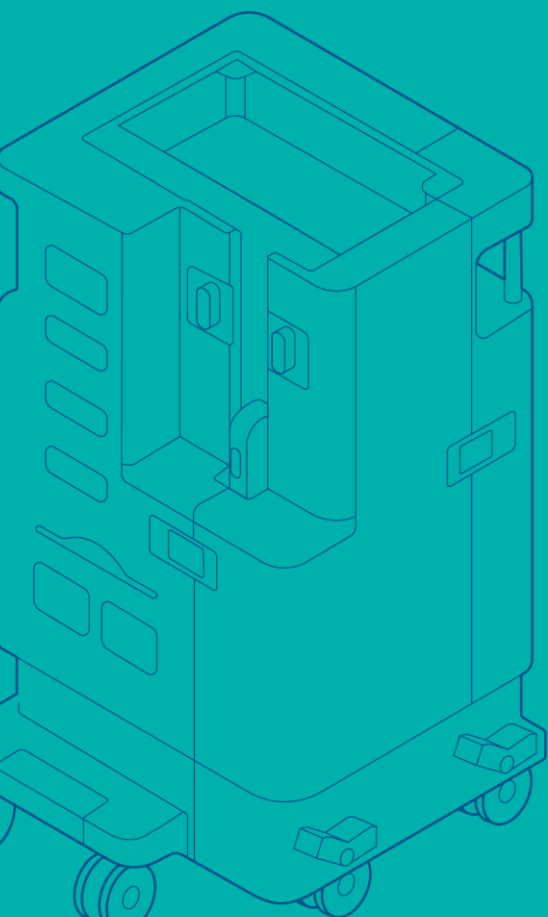

Rediroom je vhodný v případě:

- Chřipky
- Záškrtu
- Příušnic
- Černý kašel
- Meningokok
- Norovirus
- Aspergillus, adenovirus
- Rotavirus
- Streptokok skupiny A
- MRSA
- C. difficile
- Průjem neznámého původu
- CPE
- MDR gramnegativní organismy
- další infekce vyžadující opatření k zabránění šíření kapének nebo bránění kontaktům.

Co je Rediair?

ADYTON[®]
medical devices

02.

A photograph of a hospital room with two patients in beds. The patient in the foreground is sitting up and smiling, while the patient in the background is lying down. A bedside table with a water pitcher, glass, and magazines is visible between the beds. The room is bright and clean.



TICHÝ A VÝKONNÝ

10x účinnější

HEPA filtry s dvojitým sáním H14 zachycují 10x více polétavých částic než domácí čističky vzduchu HEPA 13. Má výjimečně vysokou rychlost dodávky čistého vzduchu (CADR) 600 m³/h.

Nízká hlučnost

I přes svůj vysoký výkon je při běžném používání Rediair tišší než konverzace. Noční režim zhasíná LED diody a ještě více snižuje hlasitost, aby napomohl ke kvalitnímu spánku.

Jednoduché ovládání

Rediair je navržen tak, aby se snadno používal. Stačí zapnout a okamžitě začne čistit vzduch. Automatický režim sleduje kvalitu vzduchu a upravuje rychlost ventilátoru v reálném čase.

 rediair™

PLNĚ FUNKČNÍ ZA MÉNĚ NEŽ 5 MINUT





rediroom



rediair™

Děkujeme za
pozornost